

Ventilada | Baja velocidad | De sobremesa



La TD-500 ofrece un excelente confort de uso y una selección de 6 rotores, incluidos los populares rotores basculantes para tubos de 15 ml y 50 ml. Incorpora una pantalla táctil LCD inteligente, fácil de utilizar incluso con guantes. Su sistema operativo permite centrifugación multietapa y almacenar hasta 1000 programas.

N.º de pedido: 0101150000

10

CARACTERÍSTICAS

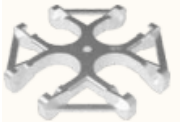
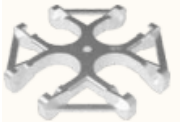
Funciones fáciles de usar >hasta 1000 programas definidos por el usuario >hasta 1000 historiales de ejecución, exportables vía USB >hasta 40 velocidades de aceleración y desaceleración >hasta 5 etapas de centrifugación multietapa disponibles >rango del temporizador hasta 99 h 59 min 59 s, incrementos de 1 s	Pantalla táctil LCD >Simple y clara para mostrar todos los parámetros >Pantalla táctil, fácil de configurar los parámetros >RCF se puede configurar directamente >RPM y RCF se convierten automáticamente >El usuario puede configurar parámetros incluso con guantes >El usuario puede restablecer parámetros mientras el rotor está girando
Seguridad garantizada >Control mediante microprocesador >Bloqueo electrónico motorizado de la puerta >La puerta no puede abrirse mientras el rotor está girando >Bisagra neumática para evitar la caída de la puerta >Puerto en la puerta para calibración y comprobación del funcionamiento >Liberación de emergencia del bloqueo de la puerta >Contraseña para bloquear el equipo >Software para evitar la sobrevelocidad	Componentes de calidad >Motor: motor de frecuencia variable sin escobillas; >funcionamiento estable, sin mantenimiento y larga vida útil >Carcasa: acero grueso y resistente >Cámara: acero inoxidable 304; >anticorrosiva y fácil de limpiar >Rotor: rotor de ángulo fijo de aleación de aluminio; >Rotor basculante de acero inoxidable. >Los rotores son esterilizables en autoclave

DATOS TÉCNICOS

Velocidad máxima	5000 rpm
RCF máxima	4650 × g
Capacidad máxima	6 × 50 ml
Precisión de velocidad	±10 rpm
Configuración de tiempo	1 s ~ 99 h 59 min 59 s
Ruido	≤60 dB(A)
Voltaje	220 V/110 V
Consumo de energía	500 W
Dimensiones	495 × 400 × 320 mm
Peso	27 kg

ROTORES DISPONIBLES

Rotor de ángulo fijo					
Rotor	Capacidad	N.º de pedido	Velocidad máxima / RCF	Capacidad	N.º de pedido
	12 x 15 ml	0494500300	5000 rpm / 3558 x g	12 x 1 x 2 ml 12 x 1 x 7 ml tubo de sangre 12 x 1 x 10 ml tubo de sangre	1102010001 / tubo de sangre 1102010008 / microtubo 1102010002 1102010003
	6 x 50 ml	0494500400	5000 rpm / 3558 x g	6 x 1 x 5 ml 6 x 1 x 10 ml 6 x 1 x 10 ml tubo de vidrio 6 x 1 x 15 ml tubo cónico 6 x 1 x 30 ml	1102020001 1102020002 1102020006 1102020003 1102020004

Rotor basculante					
Cuerpo del rotor	Soporte	N.º de pedido	Velocidad máxima / RCF	Capacidad	N.º de pedido
 Order No.: 0495030720	 8 x 15 ml Capacidad: 8 x 15 ml N.º de pedido: 0495030810	0495030800	5000 rpm / 4620 x g	8 x 1 x 2 ml	1102010008
				8 x 1 x 2 ml tubo de sangre	1102010001
				8 x 1 x 7 ml tubo de sangre	1102010002
				8 x 1 x 10 ml tubo de sangre	1102010003
 Order No.: 0495030720	 16 x 15 ml Capacidad: 16 x 15 ml N.º de pedido: 0495030910	0495030900	5000 rpm / 4620 x g	16 x 1 x 2 ml	1102010008
				16 x 1 x 2 ml tubo de sangre	1102010001
				16 x 1 x 7 ml tubo de sangre	1102010002
				16 x 1 x 10 ml tubo de sangre	1102010003
 Capacidad: 4 x 50 ml N.º de pedido: 0495030310	 4 x 50 ml Capacidad: 4 x 50 ml N.º de pedido: 0495030310	0495030300	4000 rpm / 2976 x g	4 x 1 x 5 ml	1102020001
				4 x 1 x 10 ml	1102020002 / 1102020006 / tubo de vidrio
				4 x 1 x 15 ml	1102020003
				4 x 1 x 30 ml	1102020004
 Capacidad: 24 x 7 ml, tubo de sangre N.º de pedido: 0495030710	 24 x 7 ml, tubo de sangre Capacidad: 24 x 7 ml, tubo de sangre N.º de pedido: 0495030710	0495030700	5000 rpm / 4650 x g		